

Timestrip® Blood Temp — Орієнтовний розрахунок рентабельності інвестицій (ROI)

Зниження рівня втрат на 9,9% забезпечує повну окупність загального обсягу інвестицій.

За консервативною оцінкою, зниження рівня втрат на 19,8% подвоює рентабельність інвестицій.

До поточних витрат замовника не включено такі витрати, які також можуть бути зменшені завдяки впровадженню програми моніторингу:

- адміністративні витрати;
- витрати на транспортування, якщо продукцію неможливо зберегти або відновити безпосередньо на місці;
- витрати, пов'язані з незадоволеністю клієнтів, зокрема додаткові ресурси служби підтримки клієнтів;
- витрати, пов'язані з відкликанням продукції, аудитами та регуляторними штрафами;
- потенційні витрати, пов'язані із судовими справами.

Certification

FDA 510(k)

Індикатор Blood Temp 10 має сертифікацію FDA 510(k) № BK150289.

Продукція виготовляється відповідно до встановлених процедур контролю в межах системи управління якістю, схваленої IQC та сертифікованої на відповідність стандарту ISO 13485:2003, сертифікат № I9934.

Timestrip прагне забезпечувати найвищий рівень ефективності та оперативності, реалізуючи нашу головну мету — гарантоване задоволення потреб клієнтів.



the smart way to measure time & temperature

Why Timestrip® Blood Temp?

Protect against blood waste

Drive accountability

Ensure compliance

www.timestrip.com



the smart way to measure time & temperature



Заощаджуйте час.
Заощаджуйте кошти.
Зберігайте кров.

З нашим рішенням для температурного контролю
Timestrip® Blood Temp.



Представляємо Timestrip® Blood Temp

PRODUCTS



Blood Temp 6
CE CERTIFIED


- контроль темп. на рівні 6°C / 43°F;
- індикатор одноразового використання;
- розмір: 19 × 32 мм;
- активація безпосередньо на місці використання;
- наочне підтвердження факту температурного впливу.



Blood Temp 10
FDA 510(k)
CE CERTIFIED

- контроль темп. на рівні 10°C / 50°F;
- індикатор одноразового використання;
- розмір: 19 × 32 мм;
- активація безпосередньо на місці використання;
- наочне підтвердження факту температурного впливу.

БУДОВА TIMESTRIP® BLOOD TEMP

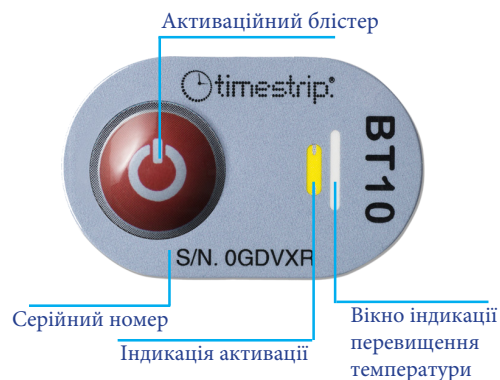

Цикл контролю придатності крові до повторної видачі з Blood Temp



ЗРУЧНІ У ВИКОРИСТАННІ ІНДИКАТОРИ



Посібник із аналізу показань Timestrip® Blood Temp

Наведений нижче огляд — це проста та зручна пам'ятка для швидкого аналізу показань індикатора.

1 Індикатор до активації

Коли Timestrip® Blood Temp перебуває в неактивованому стані:

- Вікно індикації активації залишатиметься жовтим.
- Вікно індикації порушення температурного режиму залишатиметься білим.

2 Активований індикатор

Коли Timestrip® Blood Temp 10 активовано:

- Вікно індикації активації буде зеленим
- Вікно індикації порушення температурного режиму залишатиметься білим.

3 Індикатор, що спрацював

Якщо температура всередині пакета з кров'ю перевищує 10 °C для Blood Temp 10 або 6 °C для Blood Temp 6, індикатор негайно фіксує порушення температурного режиму:

- Вікно індикації активації буде зеленим.
- Вікно індикації порушення температурного режиму стане синім.

Вікно індикації порушення температурного режиму є незворотним — його неможливо скинути або змінити.