

ZipThaw®

Розморозуйте більше плазми,
швидше та з меншими втратами

РОЗМОРОЖУВАННЯ ПЛАЗМИ ЗА ДОПОМОГОЮ **ZipThaw**


- ...і **ZipSleeve®**
 - Схвалено FDA;
сертифіковано AABB
 - Портативний, для використання
безпосередньо у місці надання
допомоги, вага 13 кг
 - Повністю сухе та швидке
розморожування
 - 3-річна повна гарантія на заміну



ПЕРЕВАГИ:

- Зменшення втрат — розморожують плазму за потреби
- Зменшення кількості помилок — вбудований сканер штрих-кодів для точності
- Повна портативність — доставка до ліжка пацієнта або безпосередньо у місці надання допомоги
- Рівномірне розморожування плазми крові до потрібної температури із повним збереженням властивостей продукту
- Сучасні технології — повністю сухе розморожування, що знижує ризик забруднення
- Низькі витрати — скорочення трудовитрат і часу


СИСТЕМИ РОЗМОРОЖУВАННЯ ПЛАЗМИ: ЖОДНА З НИХ НЕ Є ПОРТАТИВНОЮ, СУХОЮ АБО ТАКОЮ, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВИМІРЮЄ ТЕМПЕРАТУРУ САМОГО ЗРАЗКА.

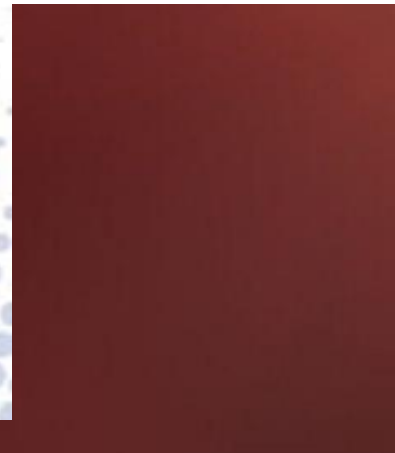


МОДЕРНІЗАЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ПЛАЗМИ...



ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОДНОМУ ПРИСТРОЇ

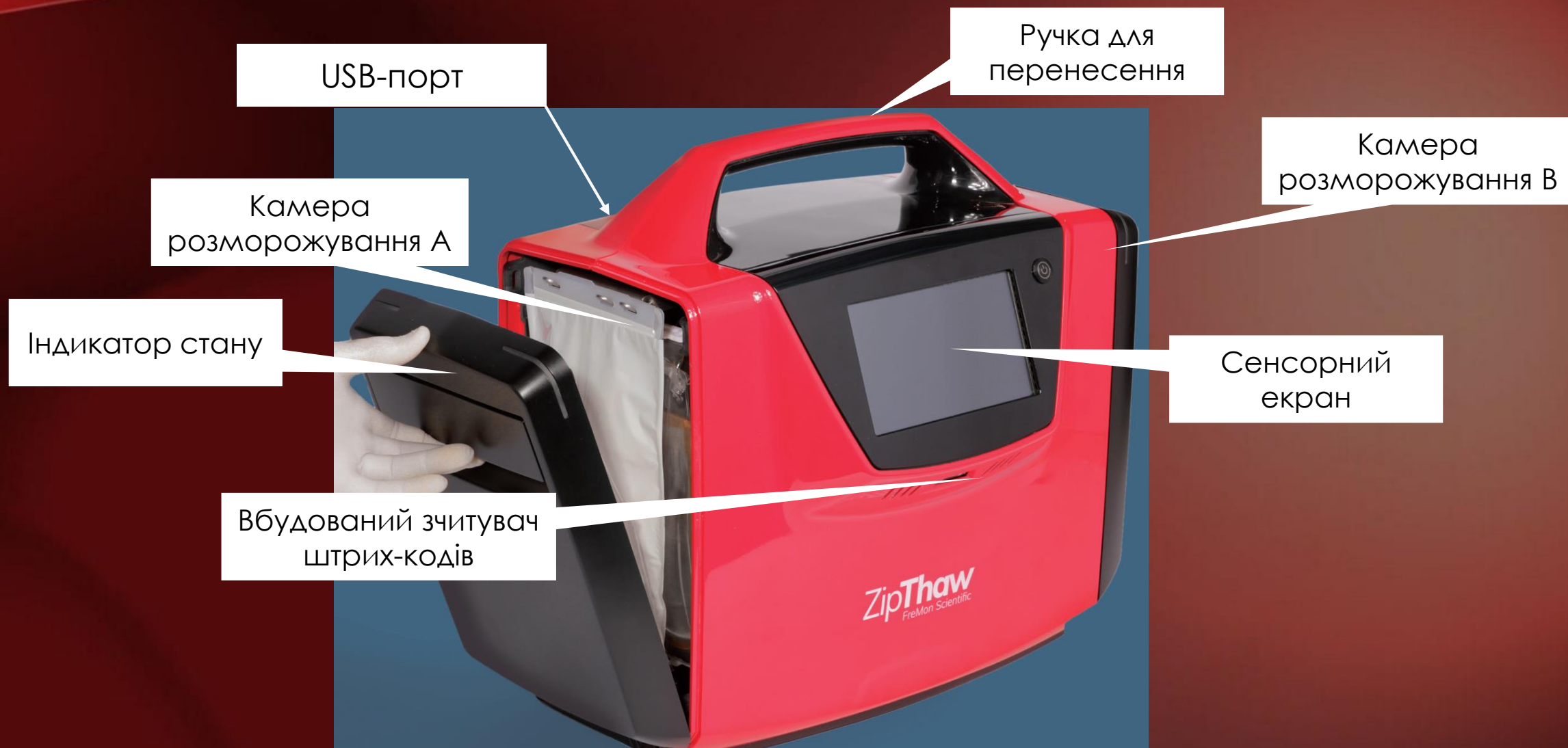

ПОПЕРЕДНІ НАЛАШТУВАННЯ: РЕЖИМ ТАНЕННЯ 15 °C ТА РОЗМОРОЖУВАННЯ 31 °C

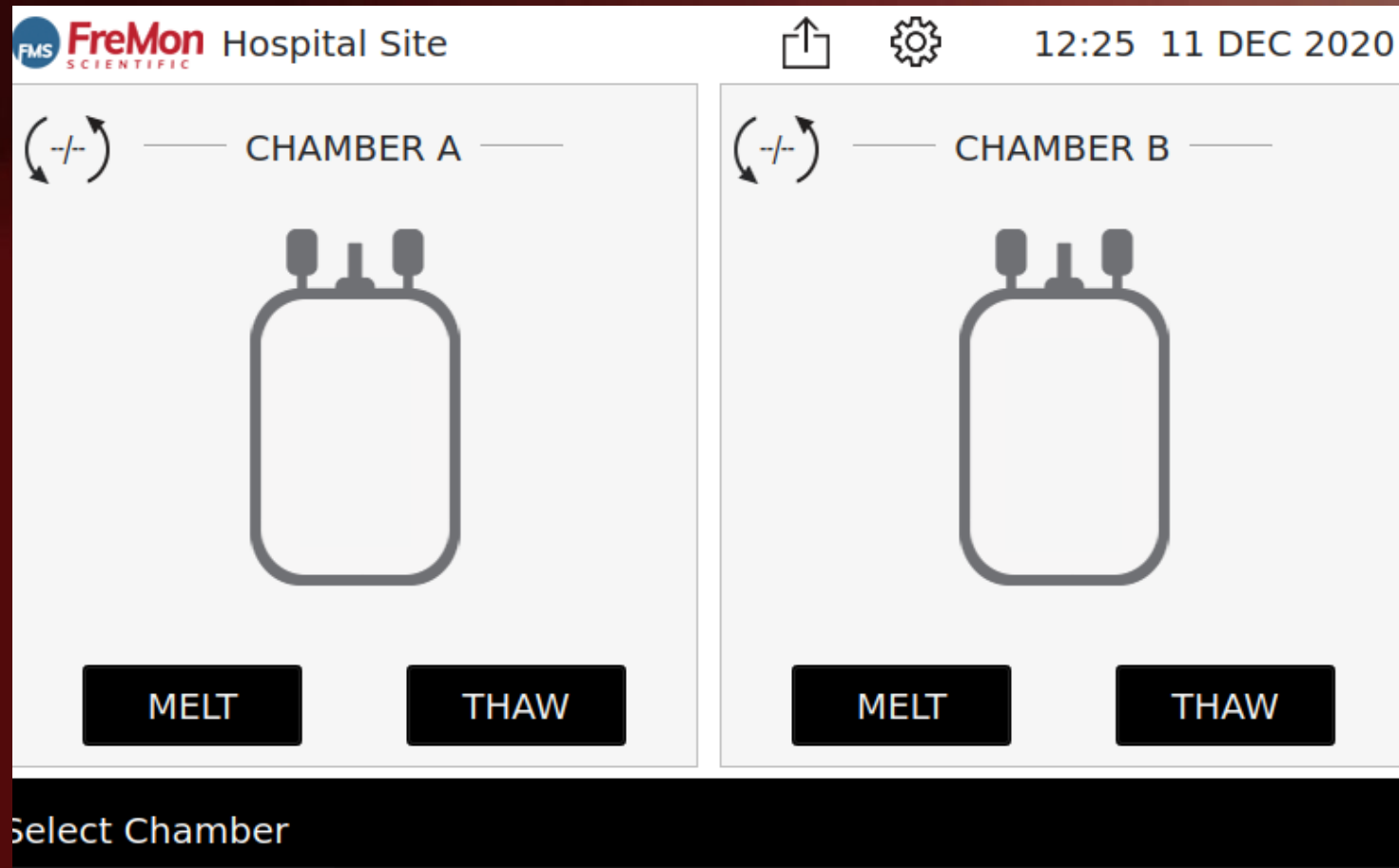

СИСТЕМА ZIPTHAW

- **ZipThaw®** — це портативний прилад з двома камерами, легкий за вагою та зручний у використанні майже в будь-яких умовах — від банку крові/біобанку до місця надання медичної допомоги або лабораторії.
- **Схвалено FDA** для розморожування FFP (свіжозамороженої плазми) та PF24.
- **ZipSleeve®** — це змінний захисний пакет для розморожування, що запобігає перехресному забрудненню, оснащений унікальним RFID-датчиком для безпечного та точного вимірювання фактичної температури плазми, яка розморожується.




ZIPSLLEEVE :

- Пакет ZipSleeve розрахований на 8-разове використання; RFID-датчик контролює використання.
- Упаковка ZipSleeve: 10 пакетів/коробка.



НАРАЗІ ПРОДАЄТЬСЯ ПО ВСЬОМУ СВІТУ:

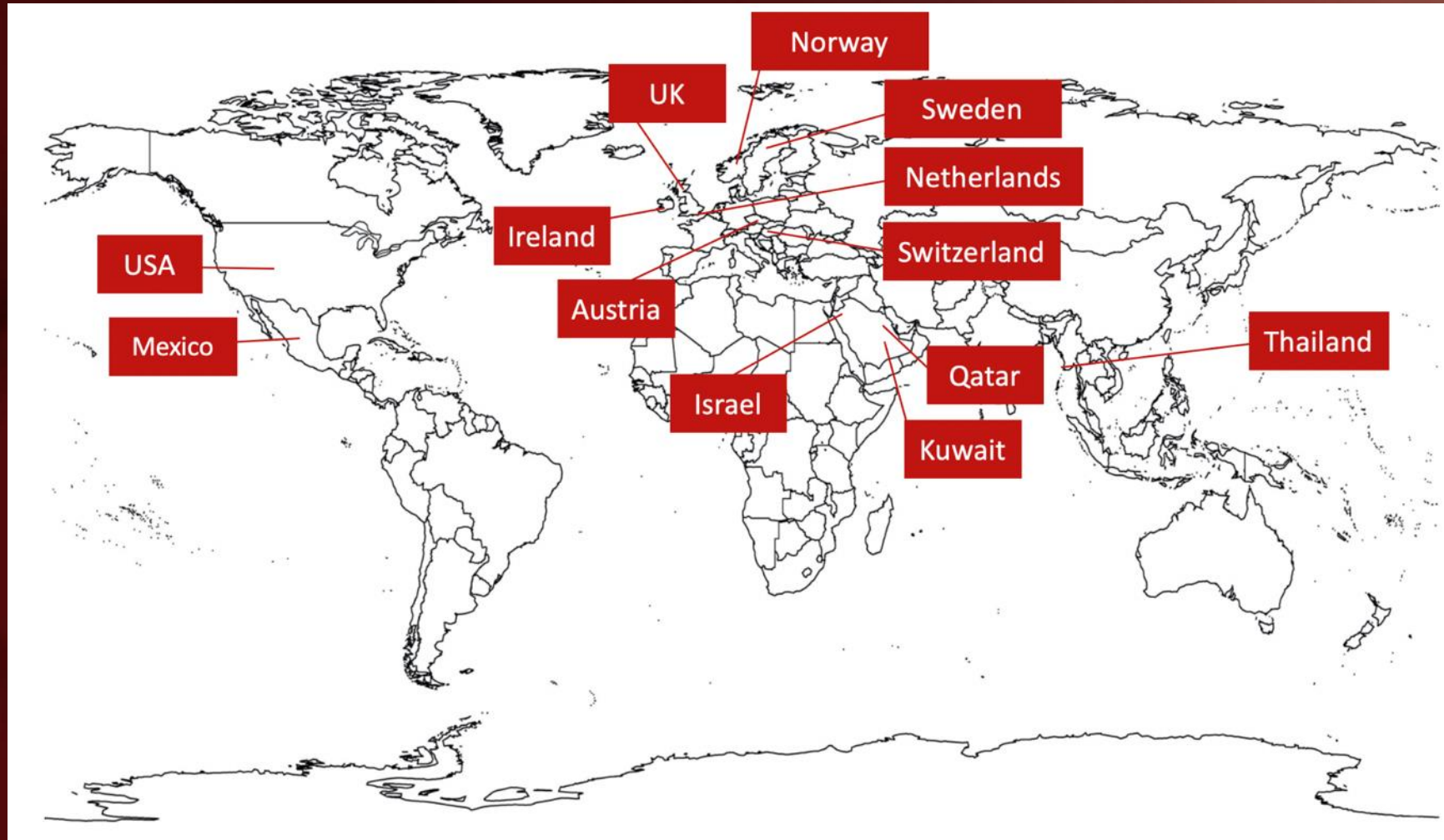

ШВИДКІСТЬ РОЗМОРОЖУВАННЯ ПЛАЗМИ ЗА ГОДИНУ

Двокамерна система сухого розморожування ZipThaw від FreMon Scientific за годину розморожує 12 одиниць до +15°C або 8 одиниць до +31°C заморожених при температурі $\leq -20^{\circ}\text{C}$ контейнерів з плазмою об'ємом 250 мл



15 хвилин до +31°C

ZipThaw®
розморожування +31°C



7 хвилин до +15°C

ZipThaw®
танення +15°C



КОНТАКТИ:

Виробник: FreMon Scientific, Inc (США)

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
Тел. + 38-067-820-54-32, + 38-096-129-80-46
e-mail: tov.redmed@gmail.com